



Как наклеить двухкомпонентный калоприемник



1. Вымойте стому и кожу вокруг стомы и осторожно вытрите ее промокательными движениями. Калоприемник клеится на чистую сухую кожу.

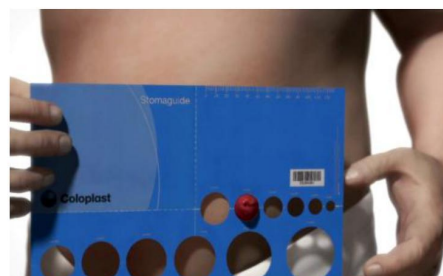

2. Измерьте стому с помощью трафарета. Если ваша стома круглая, используйте круги.

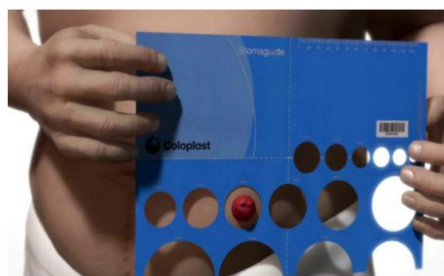



3. Если ваша стома овальная или неправильной формы, измерьте ее с разных сторон.

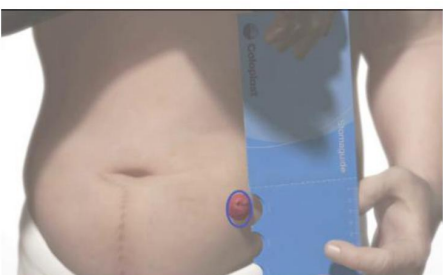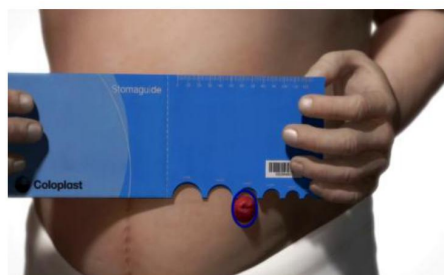

4. Отметьте окружность (овал), соответствующую форме и размеру вашей стомы на шаблоне клеевой пластины.




5. Вырежьте в пластине отверстие, соответствующее размеру и форме стомы, используя ножницы с изогнутыми концами. Удалите защитную пленку с пластины калоприемника

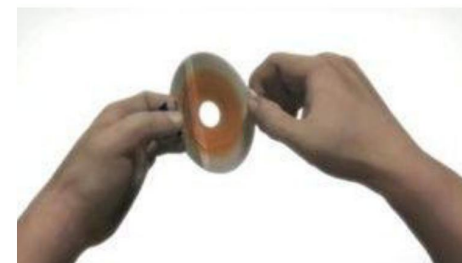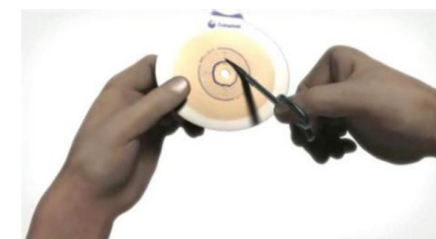

6. Проведите пальцем по краю вырезанного отверстия, чтобы разгладить неровности кромки. Наложите пластину калоприемника вокруг стомы и наклейте пластину снизу и вверх. Аккуратно разгладьте пластину, прижимая ее к коже.



7. Убедитесь, что кольцо-защелка мешка открыто. Откройте кольцо-защелку слегка нажав на защелку.

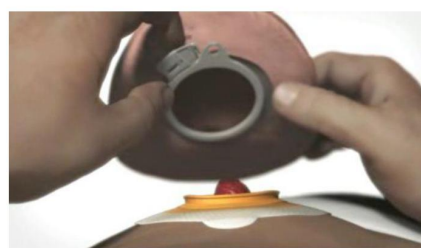

8. Наденьте фланец (крепежное кольцо) мешка на фланец пластины снизу вверх. Поверните мешок в удобное положение.



9. Закройте кольцо-защелку. Щелчок свидетельствует о том, что мешок надежно закреплен на пластине. Чтобы удостовериться, что калоприемник надежно приклеен, потяните его осторожно вниз.



10. Если в калоприемнике мало воздуха или вы хотите принять водные процедуры, закройте фильтр специальной наклейкой. Наклейки находятся в упаковке калоприемников.



Как закрыть застежку



- 11.** Если вы пользуетесь дренируемыми калоприемниками, перед наклеиванием калоприемника закройте застежку на дренажном конце мешка. Загните нижнюю маленькую полоску поверх большой.




- 12.** Дважды заверните дренажный конец, пока не увидите велюровую полоску.



- 13.** Плотно прижмите застежки-липучки к велюровой полоске.

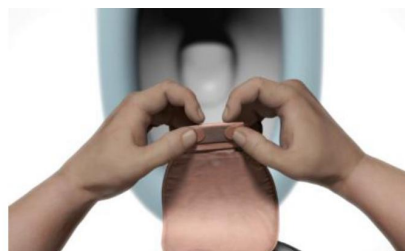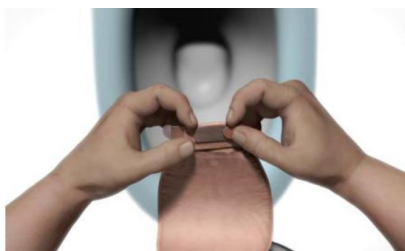

- 14.** Застежку можно спрятать под мягкое покрытие мешка, еще раз согнув дренажный конец калоприемника и приклеив его к липучке. Таким образом, мешок становится практически незаметным.

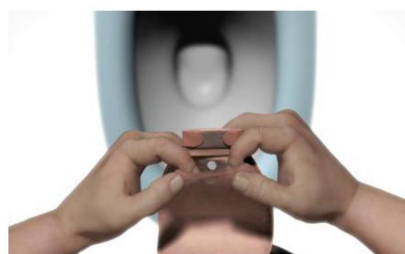

Дренирование мешка.


- 15.** Чтобы аккуратно опорожнить мешок, поднимите дренажный конец мешка вверх и откройте застежку.



16. Затем опустите дренажный конец мешка над унитазом и опорожните мешок.



17. Протрите дренажный конец калоприемника салфеткой или туалетной бумагой. Отогните маленькую полоску назад за большую, протрите края полосок. Если дренажное отверстие чистое, его можно снова закрыть.

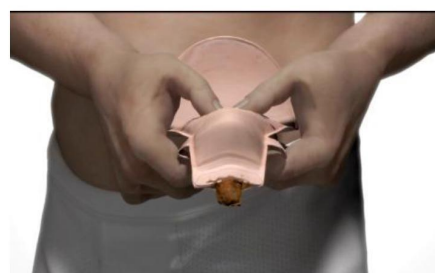

Удаление мешка \ пластины

18. Откройте кольцо-застежку, слегка нажав на защелку. Снимите мешок с пластины, потянув его за пластиковое ушко крепежного кольца вверх от себя. Возьмите за белое ушко пластины и осторожно отклейте ее сверху вниз, при этом другой рукой натягивайте кожу живота.



Утилизация калоприемников

19. Если вы пользуетесь дренируемым калоприемником, перед утилизацией его следует опорожнить. Положите калоприемник в полиэтиленовый пакет и выбросьте использованный калоприемник вместе с бытовыми отходами